



Která pomůcka pro jakou situaci?

Velké Cohesive® kroužky	Malé Cohesive® kroužky	Tenké kroužky SLIMS®	Cohesive StomalWrap™
✓ Ideální pro urostomiky ✓ Pro pokrytí velké plochy peristomální pokožky ✓ Pomáhá bránit podráždění od podložky sáčku ✓ Pro použití při hluboké konvexitě ✓ Užitečný při ochraně kůže kolem ran. 98mm průměr 19mm vnitřní otvor 2.1mm tloušťka	✓ Poskytuje MAXIMÁLNÍ kožní ochranu ✓ Pro vysoký objem tekutého odpadu ✓ Pro řešení problémů s podtékáním, průsakem ✓ Pro prodloužení doby nošení sáčku ✓ Může zajistit "měkkou" konvexitu. 48mm průměr 19mm vnitřní otvor 4.2mm tloušťka	✓ Pro každodenní ochranu pokožky a bezpečí ✓ Pro časté výměny sáčků ✓ Pro mírné podrážděnou kůži ✓ Pro předstřížené sáčky – přesnější usazení ✓ Ideální pro použití s konvexními sáčky. 48mm průměr 19mm vnitřní otvor 3.0mm tloušťka	✓ Ideální pro velké nebo oválné stomie ✓ Při snížené obratnosti ✓ Užitečný pro ochraně kůže kolem ran (zarámování) ✓ Pro podtlakovou terapii ran (NPWT). 85mm průměr 50mm vnitřní otvor 3.0mm tloušťka


Cohesive *StomalWrap*™ poskytuje úplné utěsnění kolem stomie, chrání před protékáním. Takto zvyšuje bezpečnost při použití sáčku, vaši důvěru a duševní klid.

StomalWrap™ často prodlouží nošení sáčku díky většímu bezpečí.


Cohesive *StomalWrap*™ jsou dokonale tvarovány pro velké nebo oválné stomie a díky jejich snadnému přizpůsobení rovněž ideální pro uživatele s omezenou obratností.

Jak StomalWrap™ funguje?


Poškození pokožky kolem stomie způsobuje odpad ze stomie, který se dostává do kontaktu s pokožkou. Mnoho stomiků se domnívá, že zarudlá kůže a mírný peristomální discomfort je normální a přijatelný. Nicméně dá se tomu předcházet:

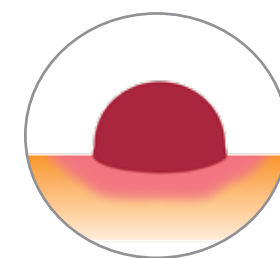

Kůže poblíž stomie je zarudlá a podrážděná

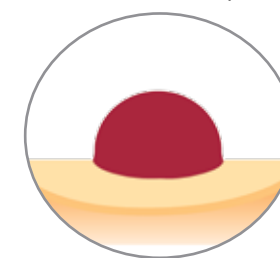

Cohesive *StomalWrap*™ předchází protékání a chrání pokožku kolem stomie

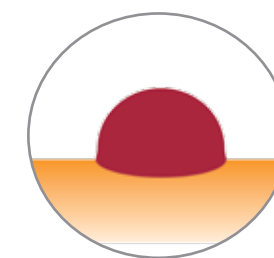

Použitím *StomalWrap*™ se předchází či řeší problémy s pokožkou.

S podtékáním se můžete rozloučit – přivítejte zdravou pokožku kolem své stomie s novým Cohesive® Stomawrap™

Cohesive *Stomawrap*™, vyráběným ze stejných nejobilnějších složek jako Eakin **Cohesive® kroužky** and **SLIMS®** tenké kroužky, které chrání pokožku kolem stomii desítky let. Jedinčný tvar činí *Stomawrap*™ snadno a rychle použitelným. Nemusíte jej ohívat, natahovat či trhat. Jen ovíňte stomii s přebytkem pro bezpečné utěsnění.



eakin® Accessories

Odstaňovač lepu - Release™

Nedráždívy odstraňovač medicínských adhesive s (Ipeidel) pro bezbolestné odstranění sáček a adhesive s přídavkem vitamínu E pro zvlhčení pokožky.
50ml spray REF 839023
30 ubrousků REF 839024

Velké Cohesive® kroužky

Velké kroužky kryjí více kůže kolem stomie, poskytují ochranu ve větší šířce.
10 těsnících REF 839001

Velmi silné kroužky pomáhají předcházet potížím s významnějším průsakem a u problémové kůže.
30 těsnících REF 839002

Cohesive® Paste

Unikátní bezalkoholová pasta jako těsnící kroužky Cohesive®.
60g tuba REF 839010




Perform™ Solidifying Agent

Sáček pro ztužení odpadu ze stomie v gel. Užívá se pro zvýšení bezpečí na lůžku, snižuje protěkaní, nadouvání sáčku a zdpach.
60 sáčku REF 839020



Optimálně: usadte přesně kolem stomie, jak ukázáno níže

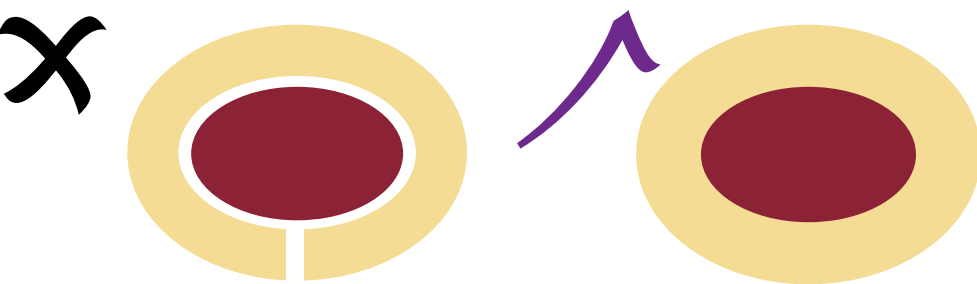


Tipy:

- Ujistěte se o pohodlném usazení bez přerušení kolem stomie.
- Cohesive *Stomawrap*™ si kolem stomie můžete natvarovat a upravit kdykoliv.
- Se *Stomawrap*™ můžete pracovat jak chcete – neztrácí přilnavost.



Pro další tipy se podívejte, jak s kroužky a C-kroužky pracuje Tom na www.eakincohesiveseals.com

Použití

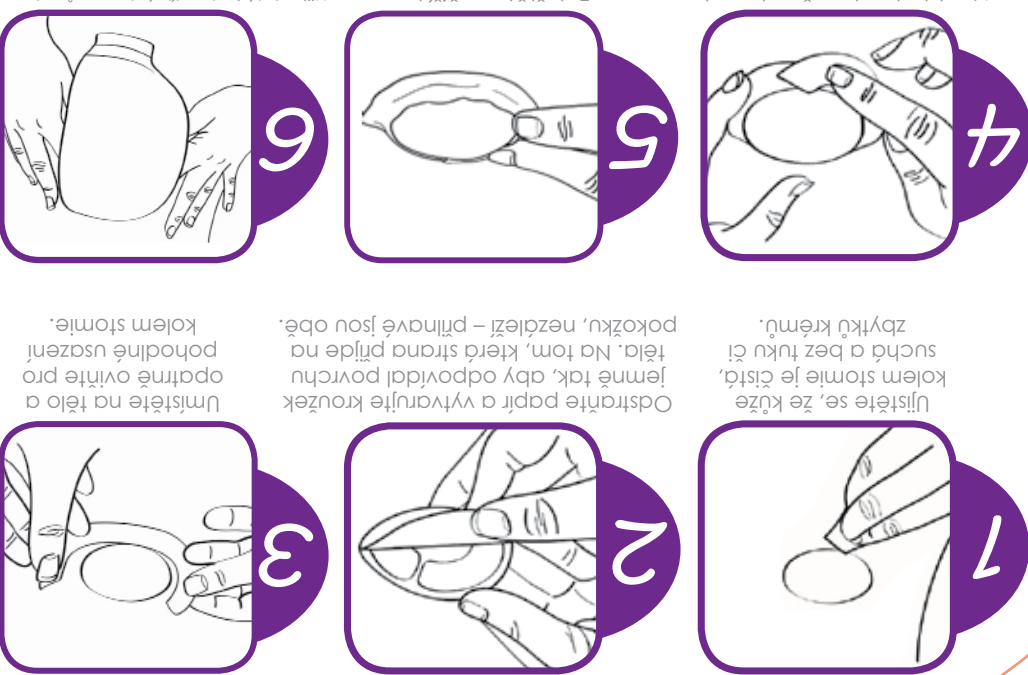

Nechte trochu přesahovat pro kůže přímo kolem stomie by dobře přilnutí kolem stomie. neměla zůstat volná.
 Zploštěte vnější hranu pomůcky. Ohřejte rukou – to usnadní bezpečné utěsnění.
 Uživatelé jednodliných pomůcek: umístěte sáček přes C-kroužek (Wrap) do vhodné polohy a krátce přidržte. Uživatelé dvouodliných: umístěte podložku přes C-kroužek (Wrap), upevněte sáček obvyklým způsobem.

Ujistěte se, že kůže kolem stomie je čistá, suchá a bez tuku či zbytků krému.

Odstraňte papír a vytvarujte kroužek jemně tak, aby odpovídal povrchu těla. Na tom, která strana přijde na pokožku, nezáleží – přilnavé jsou obě.

Umístěte na tělo a opatrně ovíňte pro pohodlné usazení kolem stomie.