

CONVEX VÝPUSTNÉ SÁČKY PELICAN - 10 kusů








VELIKOSTI	Mini průhledné	Standard průhledné	Maxi průhledné	Mini béžové	Standard béžové	Maxi béžové
Opklípbár 12-40mm	839511	839500	839489	839510	839490	839479
20 mm	-	839501	-	-	839491	839480
22.5 mm	-	839502	-	-	839492	839481
25 mm	-	839503	-	-	839493	839482
27.5 mm	-	839504	-	-	839494	839483
30 mm	-	839505	-	-	839495	839484
32.5 mm	-	839506	-	-	839496	839485
35 mm	-	839507	-	-	839497	839486
37.5 mm	-	839508	-	-	839498	839487
40 mm	-	839509	-	-	839499	839488
Opklípbár 15-60mm	-	839512	-	-	-	-

NASTAVITELNÝ STOMICKÝ PÁS

	Velikost balení	Kód výrobku
Nastavitelný stomický pás	1	839520



DOPLŇKY

Podložky Cohesive SLIMS® Seals			
	Podložky užšího profilu také předcházejí vytékání a zajišťují pohodlí a jistotu u všech typů stomií. (průměr 48mm)	30 kusů	839005
Malé podložky Cohesive® Seals			
	Velmi tlusté podložky pomáhají v prevenci problémů s větším vytékáním a s problémovou pokožkou. (průměr 48mm)	30 kusů	839002
Velké podložky Cohesive® Seals			
	Velké podložky pokrývají větší plochu pokožky kolem stomie. Ideální pro urostomie nebo pro osoby s citlivou pokožkou. (průměr 98mm)	10 kusů	839001
Cohesive® PASTE			
	Jako všechny doplňky Cohesive®, tento výrobek neobsahuje alkohol. Používá se pro vyšší ochranu pokožky, pro vyplňování kožních záhybů, jizev a nerovností.	1 tuba (60g)	839010
Perform™ Absorbens Stolicce			
	Přípravek pro kontrolu sáčků, který přemění obsah na gel. Používá se přes noc pro zvýšení jistoty, protože snižuje vytékání, nadouvání sáčku a hluk.	60 váčků	839020
Release™ Odstraňovač Lepidla			
	Jemný odstraňovač lepících vrstev s přísadkou vitamínu E pro bezbolestné odstranění sáčků a lepidel.	50ml sprej	839023
		30 sáčků	839024
Protect™ Bariérový Film			
	Silikonový bariérový film s přísadkou vitamínu E chrání pokožku před tělními tekutinami, exkoriacemi a lepidly.	30 sáčků	839025

eakin® 



eakin® 

Manufactured by:
TG Eakin Limited
15 Ballystockart Road
Comber
Severn Irsko
BT23 5QY

eakin® 

Eakin CZ s.r.o.
Hlinky 64, 603 00 Brno, Czech Republic
Tel.: +420 800 110 110
e-mail: asistentka@eakin.cz
web: www.eakin.cz

PELICAN™
Pouches
VÝPUSTNÉ

PROČ SI NEZJEDNODUŠIT PÉČI O STOMII?

Výpustné sáčky PELICAN nabízejí snadný způsob péče o stomii. Dostupné v plochém a konvexním provedení, každá vlastnost byla důkladně promyšlena tak, aby sáčky poskytovaly veškeré pohodlí bez jakýchkoli komplikací. Jak je z mnoha vlastností zřejmé, snadnost použití je důležitým prvkem designu našich výpustných sáčků.

VLASTNOSTI SÁČKŮ PELICAN™

Výpustné sáčky PELICAN mají vysoce vyvinutý voděodolný filtrační systém s kontrolou toku pro účinnější prevenci zápachu. Dodávány jsou i kryty filtrů.

Podložky na výpustných sáčcích PELICAN jsou velmi jemné k pokožce. Poskytují také pohodlné a přitom bezpečné uchycení. Pro ještě vyšší ochranu před vytékáním můžete používat doplňky řady Cohesive®.

Výpustné sáčky PELICAN mají pro zjednodušení použití předem střížené podložky, což zajišťuje dokonalé přilnutí. Pokud však není vaše stomie dokonale kruhového tvaru, bude vám lépe vyhovovat sáček pro osobní střížení. Na povrchovém filmu podložky si můžete snadno vyznačit tvar své stomie a vystřihnout otvor, který bude přesně odpovídat vaší stomii.


Přídazovací štítek je jasně vyznačený a snadno ho najdete.

Všechny výpustné sáčky PELICAN se pyšní hedvábně měkkou tkaninou, která umožňuje nošení sáčku v tichosti a pohodlí.

Výpustné sáčky PELICAN jsou řada anatomicky tvarovaných sáčků, které vyhovují různým tvarům těla.

Bezsvorkový uzavírací systém výpustných sáčků PELICAN zajišťuje maximální bezpečnost a jistotu. Výpustné sáčky se díky svým ojedinělým vlastnostem, jako je otevírací štítek a velký otvor, snadno vyprazdňují a čistí. (viz zadní strana Návodů k použití).

Kromě toho je spodní strana výpustných sáčků zhotovena z prostřížené tkaniny. Přes průhledný film jde vidět na stomii, což umožňuje snadné a přesné připevnění sáčku. Prostřížená zadní část také umožňuje snadné nasazení krytu filtru. V ostatních případech hedvábně jemná tkanina diskretně kryje stomii.

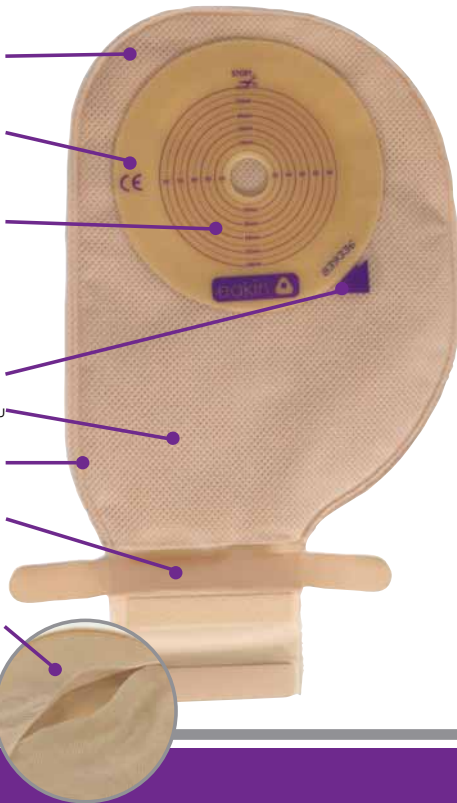

VLASTNOSTI KONVEXNÍCH SÁČKŮ PELICAN™



Kromě všech vlastností již uvedených mají konvexní výpustné Pelican™ sáčky následující výhody:

- Tento pohodlný konvexní sáček má unikátní měkkou a bezpečnou podložku s ohebnou pěnovou spodní stranou, která zvyšuje pohodlí a jistotu.
- Nabízejí mělkou až středně hlubokou konvexitu podle vašich potřeb.
- Pro dosažení maximální konvexnosti, zvýšené pohodlí a jistoty je možné používat konvexní sáčky PELICAN s podložkami Cohesive® Seals. Tím se prohloubí konvexnost a maximalizuje se ochrana proti vytékání.
- Dodávají se s poutky na pásek pro zvýšení pocitu bezpečí.
- Konvexní sáčky PELICAN jsou ohebné a na rozdíl od tradičních konvexních výrobků poskytují maximální pohodlí a jistotu.

Všechny konvexní drenážní sáčky by měly být používány pouze po konzultaci s odborníkem na péči o stomii.

SYSTÉM BEZSVORKOVÉHO ZAVÍRÁNÍ



Ohnete konečnou část výstupu.



Zatáhnete za otevírací štítek – dosáhnete tak velkého otevření pro vyprazdňování a čištění.



Po vyprázdnění zkrátka znovu přeložte a připevňte.



Pro větší bezpečnost a pohodlí založte uzávěr pod tkaninu a zabezpečte suchým zipem.

PLOCHÉ VÝPUSTNÉ SÁČKY PELICAN - 30 kusů

VELIKOSTI	Mini průhledné	Standardní průhledné	Maxi průhledné	Mini béžové	Standard béžové	Maxi béžové
Opklipbar 15-65 mm	839360	839336	839312	839348	839324	839300
20 mm	-	839337	839313	839349	839325	839301
25 mm	-	839338	839314	839350	839326	839302
27.5 mm	-	839339	839315	839351	839327	839303
30 mm	-	839340	839316	839352	839328	839304
32.5 mm	-	839341	839317	839353	839329	839305
35 mm	-	839342	839318	839354	839330	839306
37.5 mm	-	839343	839319	839355	839331	839307
40 mm	-	839344	839320	839356	839332	839308
45 mm	-	839345	839321	839357	839333	839309
50 mm	-	839346	839322	839358	839334	839310
55 mm	-	839347	839323	839359	839335	839311
Poooperační prostříhovací Maxi průhledný 839361						